

Pocketalker® 2.0

Personlig forsterker modell PKT 2.0

BRUKERhåndbok



Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene og advarslene før du bruker dette produktet. Oppbevar disse instruksjonene til senere bruk.

Innhold

Sikkerhetsadvarsler	3
Oversikt	5
Artikler som følger med	6
Oversiktsdiagram	7
Komme i gang	8
Opplading av NiMH-batterier	12
Utvide den eksterne mikrofonen.....	15
Bruke valgfri halsløkke	16
Bruke snoren	17
LED-lamper	19
Tips og råd / Feilsøking	20
Rengjøringsinstruksjoner.....	21
Spesifikasjoner	22
Begrenset garanti	25

Sikkerhetsadvarsler

FORSIKTIG!

Pocketalker 2.0 kan produsere svært kraftige lydnivåer. For å forhindre lydnivåer på mer enn 132 dB som potensielt kan skade hørselen med langvarig eksponering, bruk bare øretelefoner og hodetelefoner fra Williams Sound. Williams Sound hodetelefon modell HED 026 skal ikke brukes sammen med Pocketalker, da det kan gi høyere lydnivåer enn 132 dB.

FORSIKTIG!

Dette produktet er et hjelpemiddel utviklet for å forsterke lyder til et høyt nivå som kan forårsake hørselsskade hvis brukt feil. For å beskytte din egen hørsel og andres, bør produktet brukes som anvist. Misbruk eller feil justering kan medføre skade.

1. Sjekk at volumet er slått av før øretelefonen eller hodetelefonen slås på. Juster volumet til et behagelig nivå når du bruker øreplugger eller hodetelefon.
2. Still inn volumnivået til minimumsinnstillingen som du trenger for å høre.
3. Hvis du opplever feedback (en hylende eller skrikende lyd), senk lydnivåinnstillingen og flytt mikrofonen bort fra ørepluggen eller hodetelefonen.

FORSIKTIG!

1. Før du bruker dette produktet med pacemaker eller annen medisinsk enhet, snakk med legen din eller produsenten av pacemakern eller annen medisinsk enhet.
2. Hvis du har pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du kontrollere at du bruker dette produktet i samsvar med retningslinjene for sikkerhet som er fastsatt av legen eller produsenten av pacemakern.

FORSIKTIG!

Ikke la barn eller andre uvedkommende personer få tilgang til dette produktet.

ADVARSEL!

1. For å hindre skade, ikke bruk produktet nær vann eller utsett for fuktighet, damp, dusj, regn eller væsker.
2. Rengjør din Pocketalker 2.0 og delene som anbefalt i avsnittet "Rengjøringsinstruksjoner" i denne håndboken (eller se teknisk bulletin TCH 020 "Rengjøringsinstruksjoner for Pocketalker" ved å besøke vår hjemmeside).
3. For å unngå skade, ikke bruk eller lagre dette produktet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre produkter som produserer varme.
4. For å unngå skade, bruk bare vedlegg/tilbehør spesifisert av Williams Sound.
5. For å hindre kvelningsfare, ikke bruk produktet med en halsløkke eller snor i områder hvor de kan trekkes i eller fanges i maskiner eller andre gjenstander.
6. For å hindre skade, ikke bruk produktet med deler som er ødelagt eller som mangler, eller som er frynsete eller har ødelagte ledninger.
7. For å hindre skade, aldri prøv å tørke produktet med hårføner, ovn eller mikrobølgeovn.
8. For å hindre skade, ikke bruk produktet under kontaktrelaterte aktiviteter eller mens du sover.
9. For å hindre skade, ikke demonter produktet.
10. For å hindre skade, skal Pocketalker 2.0, dens deler og batterier oppbevares utilgjengelige for spedbarn, barn, kjæledyr og alle som kan svelge disse eller skade seg selv på annen måte.
11. For å unngå batterilekkasje, ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på to måneder eller lenger.
12. For å hindre skade, prøv aldri å lade uoppadbare batterier.
13. Vær oppmerksom på muligheten for at din Pocketalker 2.0 kan slutte å virke uten varsel. Ha dette i bakhodet når du beveger deg i trafikken eller er avhengig av varselslyder på annen måte.
14. Bruk av hodetelefoner eller øreplugger når du kjører bil (eller annet kjøretøy) kan begrense eller forhindre oppfatningen av omkringliggende lyder og dermed forårsake en ulykke.
15. For å hindre skade, må det ikke brukes i nærheten av rent oksygen eller når du bruker rent oksygen.

VARSEL!

FORSØK PÅ Å UTFØRE REPARASJON ELLER SERVICE PÅ DENNE ENHETEN VIL GJØRE GARANTIEEN UGYLDIG.

Overlat reparasjoner til kvalifisert personell. Service er påkrevd hvis enheten er skadet på noen måte; hvis væske er kommet inn i enheten, den er blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt, blitt sluppet i bakken eller ødelagt på noen måte.

Oversikt

Pocketalker®2.0 er et allsidig hørselshjelpemiddel av høy kvalitet for å forbedre kommunikasjon i vanskelige lyttesituasjoner. Pocketalker gir klar, distinkt lyd, mens store, håndterbare kontroller gir enkel betjening.

Bruk Pocketalker for å forbedre hørselen når du snakker med én person, i små grupper, mens du lytter til favoritt TV- eller radioprogrammet ditt eller kjører bil.

Pocketalker selges ikke, annonsere ikke og er ikke tiltenkt bruk som personlig høreapparat. Williams Sound anbefaler at alle individer som opplever hørselstap undersøkes av en lege/audiolog for å finne årsaken før du bruker en lydforsterkerenhet som Pocketalker.

Pocketalker tilbys med oppladbare alternativer.

Ta kontakt med Williams Sound for mer informasjon på 1-800-328-6190.


Artikler som følger med

PKT 2.0

- (1) PKT 2.0 Personlig forsterker
- (1) BAT 010-2 To alkaliske AAA-batterier
- (1) MIC 014-R innpluggingsmikrofon, rundstrålende
- (1) EAR 042 øreplugger med dobbel stereoisolasjon
- (1) HED 024 stereo-hodetelefoner
- (1) RCS 003 Lanyard

Alt tilbehør kan kjøpes separat


Oversiktsdiagram

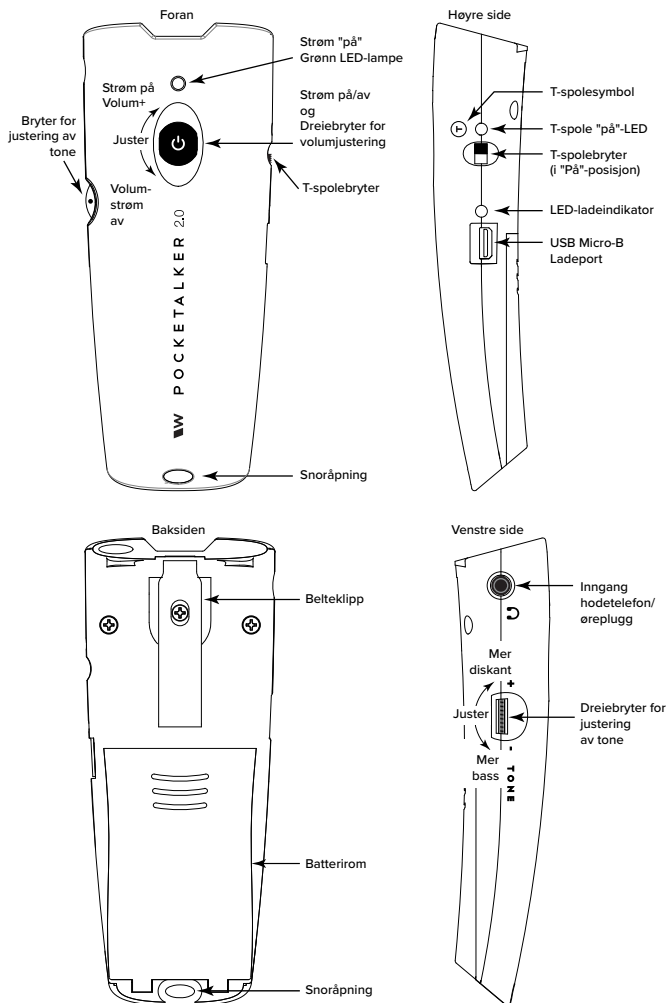

Komme i gang

1. Åpne batteridekselet: Trykk fast med tommelen på kantene av dekselet og skyv det ned og bort fra det Pocketalker 2.0.
2. Sett Batteritype-bryteren til posisjonen for batteritype som skal brukes (oppladbart/NiMH eller alkalisk).

Installering av batteri

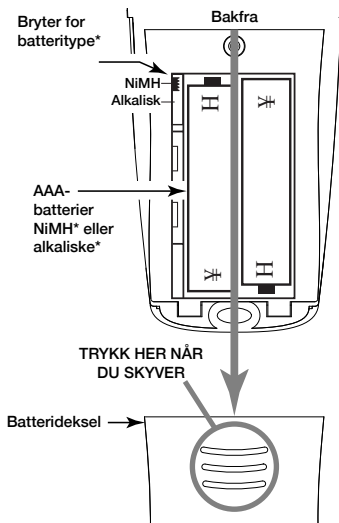

**MERK: Hvis du bruker oppladbare NiMH AAA-batterier, MÅ batteribryteren settes til posisjonen NiMH for å gi mulighet for å lade!*


3. Trykk 2 AAA-batterier på plass i batterirommet, og vær forsiktig så du forholder deg til riktig plassering av terminalene (+) og (-).
4. Pocketalker-systemet ditt leveres med hodetelefoner og øretelefoner for best ytelse. Williams Sound tilbyr flere alternativer – besøk www.williamssound.com.

ADVARSEL!

Lad bare batterier anbefalt av Williams Sound. For å unngå personskade, ikke prøv å lade alkaliske eller andre uoppladbare batterier!

Hodetelefoninngang/øreplugg

Sett fra venstre side:

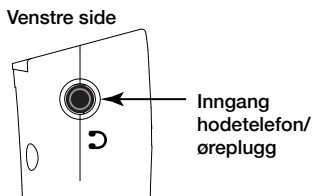


5. Bruk ørepluggene eller hodetelefonen så den har en behagelig passform.

Merk: Hvis du bruker en enkel/mono hodetelefon/øreplugg eller nakkeløkke, dreier du balansen helt til venstre (mot klokken) – dette maksimerer volumet og bidrar til å maksimere batteriets levetid.

Balansejustering – Enkle/doble øretelefoner


Batterirom:

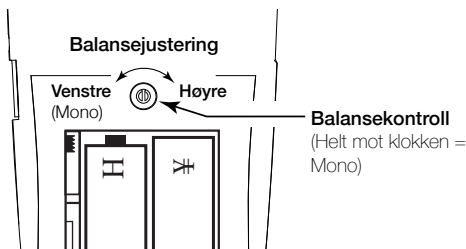

6. Juster balansen for typen hodetelefon eller øreplugg som brukes. Bruk en liten skrutrekker, dreii til venstre (eller høyre) for å øke (eller senke) volumnivået på venstre eller høyre side av hodetelefonene.
7. Lukk dekselet til batterirommet: Innrett dekselet på baksiden av enheten og skyv det oppover til det klikker på plass.
8. Valgfritt: Hvis den eksterne mikrofonen (MIC 014-R) brukes, plugg den inn i inngangen til den eksterne mikrofonen på toppen av enheten.

Bruk / installasjon av mikrofon


Sett ovenfra:

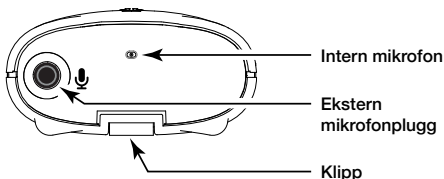

- Slå på the Pocketalker ved å dreie på bryteren "Strøm på/av" (plassert foran) mot toppen. Den grønne "strøm på" LED-lampen foran på enheten skal lyse. Når bryteren roteres mot toppen, blir volumet høyere.

Strøm på/volumjusteringsbryter

Sett forfra:

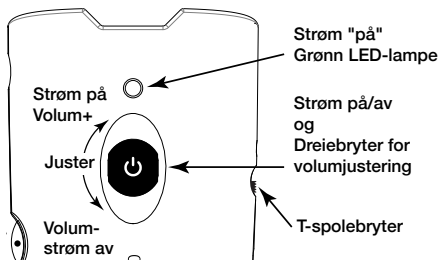


- Juster volumet opp eller ned i henhold til dine preferanser ved å rotere volumbryteren mot toppen (for mer volum) eller mot bunnen (for lavere volum).

Merk: Den grønne LED-lampen for strøm "På" blinker raskt når batterinivået er lavt.


- Juster tonen i henhold til dine preferanser. Når du dreier tonekontrollen mot toppen (+), forsterkes diskanten (høye frekvenser). Når du dreier tonekontrollen nedover (-), styrkes bassen (lave frekvenser). Den hvite prikken på bryteren viser normal posisjon (ingen forsterkning av bass eller diskant).

Tonejusteringsbryter

Sett fra venstre side:

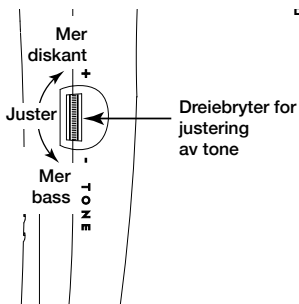

Sett forfra:

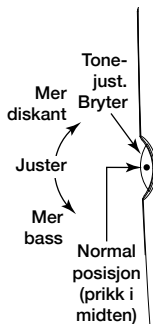

TALKER 2.0

Bruke den innebygde T-spole med løkkesystem


Pocketalker kan brukes med løkkesystemer. Når T-spolebryteren på Pocketalker er aktivert, deaktiverer Pocketalker mikrofoninngangen, henter sløpfesignalet og sender lyden gjennom hodetelefonpluggen.

For å bruke denne funksjonen:

Følg instruksjonene "Komme i gang" og *i stedet* for trinn 8, sett T-spolebryteren til "T-spole"-posisjonen (opp mot T-spolesymbolet). LED-lampen for T-spole "På" over bryteren, lyser.

Intern T-spolebryter og LED-lampe

Sett fra høyre side:

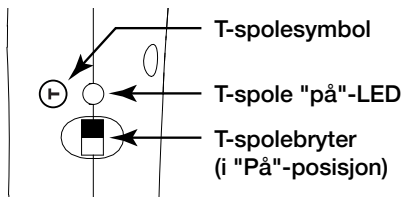

Merk: For best ytelse ved bruk av T-spolefunksjonen, må Pocketalker være i en *vertikal* retning. Dette sikrer den beste magnetiske koblingen til sløyfesystemet. Når T-spolebryteren på Pocketalker er aktivert, deaktiverer Pocketalker mikrofoninngangen.

Opplading av NiMH-batterier

BATTERILADESETT MODELL BAT KT7:

SIKKERHETSADVARSLER

1. For å unngå personskade, aldri lade batterier når Pocketalker 2.0 er i innelukkede rom som håndvesker, etuier eller andre lukkede oppbevaringsposer.
2. For å unngå personskade, trekk ut laderen når det lyner eller når lading er fullført og enheten ikke har vært brukt på to måneder eller mer.
3. For å unngå personskade, vær informert om at forskjellige vekselstrømspanninger forutsetter bruken av forskjellige typer vegguttagsadapere. Sjekk linjespenningen i ditt område og bruk riktig type støpsel.
4. For å unngå personskade, bruk bare strømforsyningen som leveres av Williams Sound. Andre strømforsyninger kan ha lignende spesifikasjoner, men er kanskje ikke like. Bruk av en ikke-godkjent strømforsyning kan utgjøre en sikkerhetsfare eller gjøre enheten delvis eller helt ubrukelig, og kan gjøre garantien ugyldig.
5. Ikke bruk strømforsyningen eller ledninger hvis de har blitt skadet på noen måte.
6. Ikke lad batteriene i mer enn 24 timer. Etter 24 timer, trekk ut ladestrømforsyningen fra vegguttaket.

FOR KUNDER I USA

Dette utstyret er testet og funnet for å overholde grenseverdiene for klasse B digital enheter, i henhold til del 15 av FCC-reglene.

	FORSIKTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØT – IKKE ÅPNE	
FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, IKKE TA AV DEKSELET (ELLER SIDENE). INGEN INNVENDIGE DELER KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE SKAL UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONALE.		

FOR KUNDER I CANADA

Denne digitale klasse B-enheten oppfyller alle krav til kanadiske forskrifter for interferensforårsakende utstyr.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.



Instruksjoner for lading

Pocketalker can lade NiMH-batterier på nytt når brukt sammen med et valgfritt BAT KT7 (internasjonalt) ladesett.


1. Sjekk eller endre batteribryteren (sitter i batterirommet) til NiMH-posisjonen.
2. Kontroller eller sett inn NiMH-batterier i batterirommet. Følg polariteten når du setter inn batteriene.
3. Bruk USB A- til USB Micro-B-kabelen og koble USB Micro-B-enden inn i USB Micro-B-ladeporten på Pocketalker. Plugg USB A-enden inn i USB A-porten på strømforsyningen som følger med ladesettet. Plugg strømforsyningen inn i et vegguttak.
4. Ladeindikatoren blinker langsomt under lading, og deretter lyser den kontinuerlig når enheten er ladet.

ADVARSEL!

For å unngå personskade, ikke prøv å lade alkaliske batterier på nytt! Lad NiMH-batterier bare når det er anbefalt av Williams Sound (BAT 022-2).

Ladekoblinger

BAT KT7 (internasjonalt) ladesett

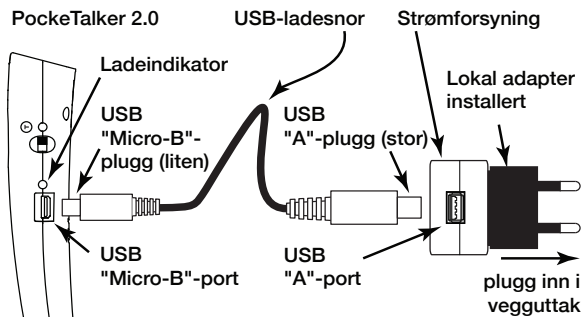

Lytte under samtaler med andre

Pocketalker henter opp lyder og forsterker dem i henhold til volumet du har stilt. For best resultat, plasser eller hold mikrofonen til Pocketalker så nær som mulig til personen som snakker.

Sitter

Mange brukere setter Pocketalker på et bord hvis de sitter i en restaurant eller i en liten gruppe. Rett mikrofonen i retningen av personen som snakker.

Står eller går

Mange brukere benytter Pocketalker-"klemmen" og fester den til lommen, buksene eller skjørtet. Snoren kan også brukes (se avsnittet "Bruke snoren").

I bilen

For samtaler i bilen, kan du bruke ekstern mikrofon (MIC 014-R) med valgfri 3,5 mm – 3,5 mm mikrofonskjøteledning (WCA 007 WC).

⚠ ADVARSEL!

For å hindre skade, før WCA 007 WC-ledningen slik at den ikke vil forårsake forviklinger og/eller forstyrre trygg kjøring av bil (eller annet kjøretøy) eller forårsake forviklinger andre steder.

Utvide den eksterne mikrofonen

Når Pocketalkers interne mikrofon er for langt borte fra ønsket lydkilden til å være effektive, kan skjøteledningen på 3,5 mm og 12 ft (tilleggsutstyr, WCA 007 WC) brukes til å utvide en ekstern mikrofon til en TV eller en annen person.



ADVARSEL!


For å hindre personskade, før WCA 007-ledningen slik at den ikke fører til fare for snubling eller vikling.

For å utvide mikrofonen:

1. Koble den eksterne mikrofonen inn i hunn-enden av skjøteledningen. Ordne ledningen slik at den når høyttaleren på TV-en eller en annen person. Koble hann-enden av skjøteledningen inn i mikrofoninngangen på Pocketalker.


Bruke tilleggsutstyret 3,5 mm 12 ft-skjøteledningen

Pocketalker: Sett forfra

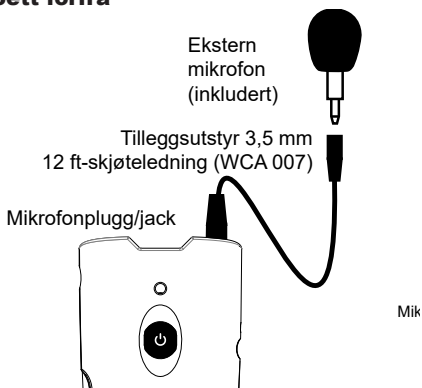

2. For TV: Fest en av plastklipsene (to PLC 004-klips er inkludert med WCA 007 WC-settet) til TV-en, i nærheten av høyttaleren, som vist i illustrasjonen.
3. For TV: Trykk mikrofonen inn i plastklipsen.
4. For TV: Slå på TV-en og Pocketalker. Juster volumet på begge etter behov.

Plassering av mikrofonklips på TV

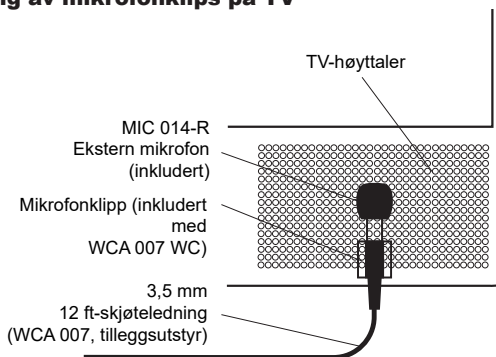

Bruke valgfri halsløkke

Williams Sounds halsløkke (NKL 001, tilleggsutstyr) kan brukes sammen med Pocketalker i situasjoner der brukeren har høreapparat med T-spole.

⚠ ADVARSEL! For å forhindre kvelning, skal ikke halsløyken brukes hvis det foreligger risiko for at den hekter seg fast eller vikles i andre gjenstander.

Slik fungerer det: Pocketalker fanger opp lyden med den interne eller eksterne mikrofonen og sender den til halsløyken. Halsløyken kobles magnetisk med T-spolen i høreapparatet. Når T-spolebryteren på høreapparatet er på, kan personen høre lyden direkte i høreapparatet.

For å bruke halsløyken: Legg halsløyken rundt halsen som vist under. Hold huset i den ene hånden, trekk opp snorlåssekulen med den andre for å stramme til på en behagelig måte. Koble halsløyken til hodetelefoninngangen på Pocketalker. Slå på T-spolen i høreapparatet. Slå på Pocketalker og juster volumet til et behagelig lyttenivå.

Bruke halsløyke



Bruke snoren

Snoren som følger med Pocketalker (RCS 003) gir en praktisk måte å transportere Pocketalker fra sted til sted; Det beskytter din investering mot at den slippes i gulvet ved et uhell, og gir rask og enkel tilgang for bruk når det er nødvendig.

⚠ ADVARSEL! For å unngå kvelning, skal ikke snoren brukes hvis det er risiko for at den hefter seg opp i maskineriet eller andre gjenstander.

Pocketalker brukes rundt halsen med snoren som følger med




Merk:

Snoren RCS 003 har en sikkerhetsfunksjon som gjør at den kobles fra når snoren utsettes for for stor belastning.




Bruke Pocketalker ved et bord med snoren som håndleddstropp

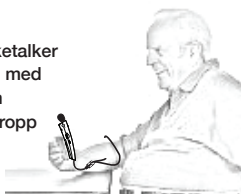

Installere snoren (RCS 003)

Punkt 1

Punkt 3

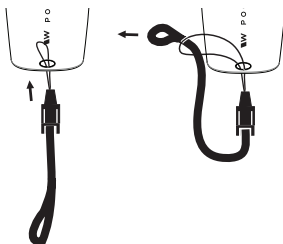

Punkt 2



LED-lamper

Strøm-LED	Lade-LED	T-spole-LED	Tilstand indikert
På	Av		Fungerer normalt; batterinivå tilstrekkelig
Blinker hurtig	Av		Batterinivået er lavt
	Langsom blinking		Batteriet lader
	På (lader plugget i)		Batteri ferdig ladet
	Av (lader plugget i)		Ingen batterier registrert eller lader ikke oppdaget
		På	T-spole i bruk; intern og ekstern mikrofoninngang deaktivert
		Av	T-spole ikke i bruk; intern mikrofon aktivert (eller ekstern mikrofon hvis den er plugget inn)
Av	Av		Batterinivået for lavt til å virke
	Blinker hurtig		Batterinivået er for lavt til å lades. PockeTalker prøver å oppfriske batteriene. Hvis rask blinking vedvarer i mer enn to timer, er batteriene for dårlige. Bytt ut med nye batterier. Hvis oppfriskingen er vellykket, skifter LED-ladelampen til å blinke langsomt. Det indikerer at normal lading nå pågår.

LED-blinkhastighet

Rask ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Langsom 

Raskt: 4 blink hvert 2. sekund

Langsamt: 1 blink hvert 2. sekund

Tips og råd / Feilsøking

Pocketalker er utviklet til å være så enkel å bruke som mulig. Hvis du har problemer, derimot, kan du sjekke følgende:

1. Hvis du bruker en ekstern mikrofon, pass på at den er plugget inn i utgangen "Ekstern mikrofon"  og T-spolebryteren er satt til "Av". Pass på at øretelefonen eller hodetelefonen er plugget inn i "hodetelefon"-inngangen . Hvis du bruker T-spolen på Pocketalker, pass på at T-spolebryteren er på og sjekk at LED-lampen for T-spolen lyser.
2. Sjekk at batteriene ikke er utladet og er riktig satt inn (vær oppmerksom på riktig polaritet $\pm$) i batterirommet.
3. Hvis du bruker oppladbare batterier, kontroller at batteriene er tilstrekkelig ladet og at batteribryteren er satt riktig i NiMH-stilling.
4. Hvis du hører en hylende eller skrikende lyd, kalles dette feedback. Avhengig av øretelefon eller hodetelefonen som brukes, hender det du får feedback når volumkontrollen stilles høyere enn 3 eller 3½.

For å redusere feedback, skru ned volumet eller flytt mikrofonen (intern eller ekstern) lenger bort fra ørepluggene eller hodetelefonene.

Prøv også å dempe tonekontrollen (mot klokken) for å redusere den høye frekvensen.

5. Hodetelefonpluggen til Pocketalker er en stereoplugg, utviklet til bruk med stereo-øreplugg eller hodetelefoner. Men hvis du bruker *mono*-øreplugg eller hodetelefoner sammen med Pocketalker, still balansekontrollen (i batterirommet) helt til venstre, eller "mono" posisjon. Dette maksimerer volumet, med hjelper også med å maksimere batteriets levetid.
6. Følg med på hvordan LED-lampene på enheten virker:
 - Strøm PÅ-LED (foran)
 - Lade-LED (på høyre side)
 - T-spole-LED (på høyre side)

Se tabellen under "LED-indikatorer" for å finne enhetsstatus og løsningen på problemet.
7. Hvis fremgangsmåten over ikke løser problemet, ta kontakt med din Williams Sound-forhandler for videre instruksjoner.

Rengjøringsinstruksjoner

FORSIKTIG!

Unngå at det kommer væske inn i Pocketalker-enheten, da det kan skade kretskortet og vil gjøre garantien ugyldig.

1. Bruk en klut med alkoholholdig løsning eller 3 % hydrogenperoksid-løsning for å rengjøre utsiden av Pocketalker og øreplugg-/hodetelefon-ledningen. Kluten du bruker til å tørke med, skal være fuktig, ikke helt våt (se Forsiktighetsregel nr. 5). Tørk forsiktig av enheten. Hvis du trykker hardt, kan det føre til at væske klemmes ut og kommer inn i enheten (se Forsiktighetsregel nr. 5).
2. Pocketalker kan rengjøres grundig med "Desinfiseringskluter av sykehuskvalitet, med blekemiddel eller alkohol". Men vi kan ikke garantere at fargingen/merkene på enheten ikke vil bli påvirket som følge av flere påføringer av blekemiddel.
3. Bytt ut skumputene i øretelefonen med hver ny bruker, eller bruk sanitære engangstrekk til hodetelefonen for hver ny bruker. (Puter/trekk til øreplugger/hodetelefon fås fra Wililams Sound).
4. Hvis du bruker en innpluggingsmikrofon (MIC 014-4), bytt ut tilleggsutstyret, det sanitære engangstrekket til mikrofonen (WND 012) med hver ny bruker. (Både MIC 014-R innpluggingsmikrofon og WND 012 sanitære mikrofontrekk fås fra Williams Sound. WND 012 selges i pakker på 100).
5. Ikke spray eller ha væske direkte på enheten. Påfør rengjøringsløsning til en bomullspad eller bomullspinne for å rengjøre Pocketalker. Ikke trykk hardt. Det er svært viktig at "Ingen væske" av noe slag kommer inn i elektronikken på enheten, (dvs. hodetelefoninngangen, mikrofoninngangen, USB-ladeinngangen, den interne høyttaleren, den interne mikrofonen, volumbryteren, tonekontrollen eller T-spolebryteren).

Spesifikasjoner

Personlig forsterker modell PKT 2.0

Dimensjoner:	4,9" L x 2,0" B x 1,0" H. (124 mm x 51 mm x 25 mm) (inkluderer ikke klips eller mikrofonenhet)
Vekt:	3,1 oz. (88 gram) (med batterier)
Farge/materiale:	Hvitt ABS/polykarbonat-støpt plasthus.
Batteritype:	To (AAA), enten 1,5 VDC alkaliske eller 1,2 VDC NiMH oppladbare* (Williams Sound BAT 010-2 alkaliske eller BAT 022-2 NiMH)
Batterilevetid:	Opptil 105 timer (typisk bruk) med BAT 010-2 (alkaliske). Indikator for lavt batteri: Strøm "På" grønt lys på frontpanelet blinker.
**NiMH-batteriet lades:	Lader: 16 timer med BAT 022-2. Rød LED-lampe blinker under lading. Slutt på lading: Den røde LED-lampen lyser kontinuerlig. På slutten av ladingen gir vedlikeholdsladning. MERK. Lading krever ladesett BAT KT7 (tilleggsutstyr).
Mikrofon:	Intern, rundstrålende NEMS-mikrofon (mikro-elektro-mekanisk system).
	Valgfri, ekstern, rundstrålende innpluggingsmikrofon med vindskjerm av skumgummi og 3,5 mm monoplugg (MIC 014-R).
T-spole:	Intern med på/av-bryter og LED-indikator.
Tonekontroll:	Den eksterne dreiebryteren gir brukeren muligheten til å justere høy/klav frekvens for å optimere hørsel.
***Balansekontroll:	Justerer volumnbalanse venstre/høyre
Strøm/volum-kontroll:	Ekstern dreiebryter for volum med integrert strøm på/av-bryter.
Mikrofonplugg:	33,5 mm, stereo miniplugg. Tip=Mic-signal, Ring=NC, Hylse=Jrd.
Hodetelefonplugg:	3,5 mm, stereo miniplugg. Tip=Venstre/Mono, Ring=Høyre, Hylse=Jrd.
Tilleggsutstyr:	Snor: RCS 003; Muliggjør bruk rundt halsen, eller som armbåndstrøpp. 3,5mm-3,5 mm skjøteledning: WCA 007 WC; utvides til en ekstern mikrofon til 12 ft. Stereo Øreplugg / Hodetelefoner / Halsløkke: EAR 042 / HED 024, HED 036 / NKL 001-S (stereo) halsløkke MonoØreplugg / Hodetelefoner / Halsløkke ***: EAR 013, EAR 008, EAR 022, EAR 041 / HED 021, HED 027 / NKL 001 (mono) halsløkke Ladesett: BAT KT7 (internasjonal)

Godkjenninger:	CE (Merknad 1), RoHS (Merknad 2), FCC, IC, WEEE (Merknad 3)
	    

Garanti: 5 år, deler og arbeid (90 dager på tilbehør)

Elektriske spesifikasjoner (1 kHz sinusurve-referanse) vanlig

Utgangseffekt:	52 mW (maks) til 32 ohm (stereo)
ALC:	Automatisk nivåkontroll; Begrenser maksimalt nivå
Forvrengning:	1 % THD (maks)
Maks. forsterkning:	63 dB v/2,5 kHz (Tone=Høy)
Driftstemperatur:	41°F til 104°F (5°C til 40°C)

Frekvensrespons

Tonekontroll på høy posisjon:	2,7dB boost ved 5 kHz, 6,7dB klipp kutt ved 400 Hz.
Tonekontroll ved midtre posisjon:	0,6 dB kutt ved 5 kHz, 2,9 dB kutt ved 400 Hz.
Tonekontroll ved lav posisjon:	2,0 dB kutt ved 5 kHz, 3,0 dB boost ved 400 Hz.

SPESIFIKASJONER ER GJENSTAND FOR ENDRING UTEN VARSEL.

*Batteribryteren må være i riktig posisjon for batteritypen som brukes.

**Lading krever valgfritt ladesett BAT KT7 (internasjonalt).

***Når du bruker **mono**-øreplugg, hodetelefoner eller halsløyke, må balansekontrollen på Pocketalker være satt helt mot klokken (til "mono" posisjon) for best volum og batterilevetid.

Pocketalker selges ikke, annonsere ikke og er ikke tiltenkt bruk som personlig høreapparat. Williams Sound anbefaler at alle individer som opplever hørselstap undersøkes av en lege/audiolog for å finne årsaken før du bruker en lydforsterkerenhet som Pocketalker.

Akustiske spesifikasjoner for hodetelefoner anbefales for bruk med Pocketalker er publisert på våre nettsider.

Merknad 1: CE-godkjenning gjelder ikke hvis produktet ikke viser CE-merket.

Merknad 2: RoHS3: Direktiv 011/65/EU + 2015/863/EU

Merknad 3: WEEE: Direktiv 2012/19/EU

Dette produktet er dekket av det europeiske direktivet ovenfor, inkludert endringer, avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Resirkuler produktet og tilbehøret i henhold til nasjonale forskrifter.

FCC-samsvarserklæring:

Denne enheten samsvarer med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to forhold: (1) Denne enheten kan forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten må ta imot all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for klasse B digitale enheter, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å prøve å rette opp interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Endre mottakerantennens retning eller flytte på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

 **ADVARSEL!** Endringer eller modifiseringer utført av bruker, som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan kompromittere brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Uttalelse fra Industry Canada:

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux conditions suivantes:

- (1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences, et*
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.*

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dette digitale apparatet i klasse B samsvarer med kanadisk ICES-003

Begrenset garanti

Williams Sound-produkter er utviklet, utformet og produsert under nøye kontrollerte forhold å gi deg mange år med pålitelig service. Williams Sound garanterer Pocketalker PKT 2.0 personlige forsterker mot defekter i materialer og utførelse i FEM (5) år. De første fem årene fra kjøpsdatoen, vil vi umiddelbart reparere eller erstatte Pocketalker PKT 2.0 personlig forsterker.

Mikrofoner, øreplugger, hodetelefoner, batterier, kabler, bæreesker og alt annet tilbehør har en 90-dagers garanti. Halsløgger har en 1-års garanti.

WILLIAMS SOUND HAR INGEN KONTROLL OVER BETINGELSENE SOM DETTE PRODUKTET BRUKES. WILLIAMS SOUND, DERFOR FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER IKKE FREMSATT OVENFOR, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, MED HENSYN TIL POCKETALKER® 2.0 FORSTERKER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER IMPLISERT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. WILLIAMS SOUND SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PERSON ELLER ENHET FOR EVENTUELLE MEDISINSKE UTGIFTER ELLER NOEN DIREKTE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER FORÅRSAKET AV BRUK, DEFEKT, FEIL ELLER SVIKT AV PRODUKTET, ENTEN SLIKE ERSTATNINGSKRAV ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNET. DEN ENESTE LØSNINGEN FOR DEFEKTER, SVIKT ELLER FEIL PÅ PRODUKTET ER UTSKIFTING AV PRODUKTET. INGEN HAR NOEN MYNDIGHET TIL Å BINDE WILLIAMS SOUND TIL NOEN FREMSTILLING ELLER GARANTI NÅR DET GJELDER POCKETALKER®2.0. UAUTHORISERTE REPARASJONER ELLER MODIFIKASJONER BRUDD PÅ GARANTIBESTEMMELSENE.

Ovennevnte utelukkelse og begrensninger skal ikke og bør ikke tolkes å bryte obligatoriske bestemmelsene i gjeldende lov. Hvis noen del eller begrep i denne ansvarsfraskrivelse anses for å være ulovlig, ugjennomførlig eller i strid med gjeldende lov av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ikke gyldigheten av de gjenværende delene av denne ansvarsfraskrivelsen påvirkes, og alle rettigheter og forpliktelser skal tolkes og håndheves som om denne begrensede garantien ikke inneholder bestemt del eller begrep som anses for å være ugyldig.

Hvis du får problemer med systemet, ring gratis for kundestøtte:

1-800-328-6190 (USA)

1-952-943-2252 (utenfor USA)